

## 제 품 보 증 서

- 제 품 명 : 이동변기 소프트타입
- 모 델 명 : RPM68109
- 구입일자 : 20 년 월 일
- 고객성명 :
- 구 입 처 :
- 전화번호 :

본사의 제품을 구입하여 주셔서 감사드립니다.

### ■ 아래와 같이 보증합니다.

1. 본 제품의 이상 발생 시 보증기간(구입 후 1년)동안 무상 A/S를 받으실 수 있습니다.
2. 본 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 실비로 수리를 해드립니다.
3. 만일 고장이 생겼을 경우에는 구입처 또는 A/S센터에 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
4. 다음의 경우에는 보증기간 중일지라도 실비를 받습니다.
  - \* 본 보증서의 제시가 없는 경우
  - \* 사용자의 취급부주의로 인한 고장
  - \* 천재지변(화재, 염해, 수해, 기타)으로 인한 고장
  - \* A/S센터 이외의 사람이 수리 및 내부개조로 인한 고장
  - \* 가정요양용 이외의 사용으로 인한 고장 및 손상
  - \* 소프트 패드 또는 발 고무 등 소모품의 손상 및 더러움

### ■ 제품 및 A/S 문의

1. 제품에 이상이 있을 경우 : 1. 모델명, 2. 고장내용, 3. 성함, 4. 전화번호  
(고장부위는 설명서 표시 명칭을 참고 하십시오.)  
구입 후 15일 이내 교환 및 환불 처리
2. 소모품 이상의 경우 : 구입처 또는 본사에서 교환(소모품 : 변기통, 나사, 고무분실)

### ■ 수리, 취급 등의 상담은 먼저 구입하신 판매점에 문의해 주시기 바랍니다.

 to your health  
**Clearview Healthcare Products, Inc.**

(주)클리어뷰헬스케어  
경기도 화성시 마도면 금당리 191-4  
전화:031)356-5407(대) 팩스:031)356-5409  
E-mail : clearview@bedsorefree.com  
website: www.bedsorefree.com

 to your health  
**Clearview Healthcare**

## 취급설명서

### 이동변기 소프트타입 RPM68109



#### 목 차


각 부의 명칭과 제품사양-----2P	조작 및 사용 방법-----4P
안전상의 주의사항-----3P	보증 및 사후관리-----5P
손질 방법-----3P	제품보증서-----6P

이동변기 소프트타입을 구입해 주셔서 감사 드립니다.

이 사용설명서를 읽어보신 후 올바르게 사용하시기 바랍니다.

특히 『안전을 위한 주의사항』(2P)은 사용 전에 반드시 읽어보시고  
안전하게 사용하여 주십시오.

## 각부의 명칭

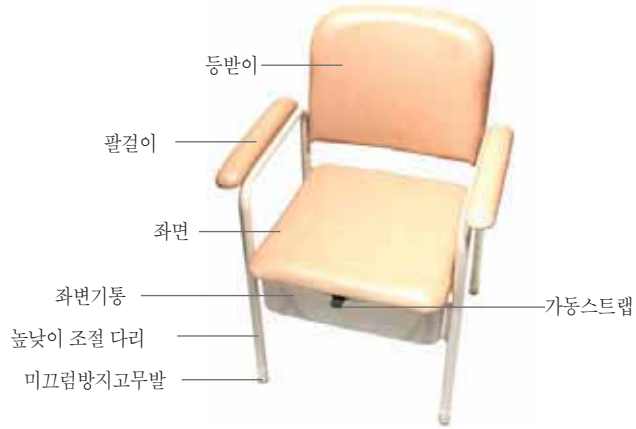

## 세부 사진



## 제품 사양

품 명	RPM68109
색 상	베이지, 연갈색
조립치수	정면폭510x측면폭480x높이830~885(mm)
좌면높이	460-510(mm)
좌면치수	폭479x안길이439(mm)
중 량	11kg
재 질	등받이, 좌면, 팔걸이 : 레자
	파이프 : 스틸, 발 고무 : PVC, 변기통: PP
허용하중	100kg

## 안전상의 주의사항

### ⚠ 경고

잘못된 방법으로 사용하면 중대한 사고로 이어질 우려가 있어 아래의 항목을 반드시 지켜 주십시오.

- 1) 사용자가 자신의 신체를 혼자 가눌 수 없는 경우는 반드시 간호하시는 분이 시중을 들어 주십시오.
- 2) 본체를 발판 대신으로 사용 하거나 뛰어오르는 행위는 하지 마십시오.
- 3) 반드시 방/ 욕실의 평평하고 안정된 장소에 놓고 사용해 주십시오.
- 4) 이동변기에는 2명 이상이 동시에 앉지 마십시오. 넘어져 다칠 위험이 있습니다.
- 5) 변기의 최대 사용자 체중은 100kg입니다.
- 6) 이동변기와 의자 이외의 다른 용도로 사용하지 마십시오.
- 7) 등받이를 지탱해서 일어서지 마십시오. (넘어져서 부상을 당하는 원인이 됩니다.)
- 8) 팔걸이를 손잡이 대신에 잡거나 가로방향으로 힘을 가하지 마십시오.

### 손질 방법

- ◆ 물기있는 수건등으로 닦은후 마른걸레로 완전히 닦아 주십시오.

⚠ 주의 뜨거운 물을 끼얹지 마십시오. 변형이나 파손의 원인이 됩니다.

⚠ 주의 쿠션이 확실히 고정되어 있는지 확인하여 주십시오.  
몸이 미끄러져 다칠 위험이 있습니다.

⚠ 주의 염소계 세제 또는 연마제, 시너 등은 사용하지 마십시오.  
플라스틱의 강도를 변화시킬 위험성이 있습니다.

## 조작 및 사용 방법

- ◆ 이동변기(RPM68109)는 사용자의 배변을 도와주는데 사용하는 이동변기입니다
- ◆ 사용시 몸 상태에 맞춰 편한 높이로 조정하여 주십시오.
- ◆ 사용시 바닥이 평평하고 안정된 장소에서 사용하여 주십시오.

**⚠ 주의** 사용전에 각부위의 볼트 등이 느슨하지 않고 고정 되어있는 것을 확인 후 사용하여 주십시오. 넘어져 다칠 위험이 있습니다.

**⚠ 주의** 다리는 4개를 같은 높이로 하여 주십시오. 본체가 넘어져 다칠 위험이 있습니다.

## ◆ 조립방법



## ◆ 좌면 높이 조정 방법

1. 버튼을 누르고 구멍의 위치를 바꿈으로서 위치 조절 가능  
버튼이 가려져 안보일 경우 다시 분리하여 구멍 확인 후 다시 설치하여 주십시오.
2. 항상 4개 다리는 같은 높이가 되도록 하여 주십시오.

## ◆ 이동변기 사용방법.

1. 통 좌변통 상부에 있는 좌면의 가동 스트랩을 잡고 완전히 뒤로 밀어주십시오.
2. 사용하신 후엔 좌면앞에 자동 스트랩을 잡고 앞으로 당겨 주십시오.
3. 좌면을 내린 상태에서는 일반의자로 사용이 가능합니다.



## ◆ 변기통 사용방법.

밑에 사진처럼 변기통에 맞게 장착하여 변좌을 내리고 사용합니다.



## 보증 및 사후관리

### ◆ 보증서에 관해서

보증서는 사용설명서에 첨부되어 있으며 반드시 보증내용 등을 잘 읽으신 후 소중하게 보관하여 주십시오. 보증기간은 구입 후 1년입니다.  
일반 가정용 이외로 사용된 경우는 보증 기간 내라도 유상 수리에 해당 됩니다.

### ● 수리를 의뢰 하실 때

보증기간 중에는 구입처에 품명, 품번, 구입일, 고장 상황, 이름, 주소, 전화번호를 알려 주십시오.  
보증기간이 지난 경우에는 구입처와 상담하여 주십시오.